

Lehátko

GE2

výškově stavitelné
elektropohonem,
dvoudílná ložná plocha



*Ilustrační obrázek lehátka s podhlavníkem 46 cm
(další varianty zobrazeny na straně 3)*



Účel použití: Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů. Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, maséren, wellnessů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřící.

Určení pacienta u Lehátka GE2: pro **dospělé pacienty** s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden pacient. Lehátko GE2 může být používáno dospělými a při dodržení výrobcem stanovených podmínek, i dětskými pacienty. (viz info v následujícím rámečku)

Při použití lehátka GE2 s dlouhým (64 cm) podhlavníkem dětským pacientem musí být podhlavník vždy ve vodorovné poloze, nepřizvednutý a pacient musí být pod dozorem odpovědné proškolené osoby.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Výškově stavitelné elektropohonem
- S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru
- Výběr ovladače (1 ks v ceně):
 - ovladač ruční s magnetem umístěný na rámu nebo
 - nožní ovladač položený na podlaze
- Bezpečnostní krabička ve standardu, která vyjmutím kolíčku vypne přívod el. proudu do elektropohonu
- Bezpečnostní spojka elektropohonu ve standardu – ochrana před skřípnutím uvnitř konstrukce lehátka
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- Rozměry ložné plochy standard 68x195 nebo rozšíření dle dohody na 76x195 a 83x195 (cm)
při změně výšky je třeba počítat u celkové délky s cca + 20 cm rezervou (posun lehátka při zdvihu - lehátko nabíhá do délky)
- Pohon elektropohon
- Výšková stavitelnost cca 46 cm – 91 cm
- Délka podhlavníku 64 cm nebo 46 cm
- Naklopení podhlavníku 64 cm 0° až + 60°, nadlehčený pomocí plynové pružiny
- Naklopení podhlavníku 46 cm -42° až + 30°, nadlehčení pomocí plynové pružiny
- Tloušťka čalounění 4 cm (2 cm pojený tužší molitan + 2 cm měkký PUR molitan)



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2021

- Maximální hmotnost pacienta 170 kg
- Maximální zatížení lehátka 174 kg
- Hmotnost lehátka 65 kg
- Lehátko GE2 je zařazeno do skupiny 1 a podle zamýšleného použití do třídy B. Nesmí být používána v blízkosti aktivních VF chirurgických přístrojů a RF stíněné místnosti zdravotnických systémů pro zobrazování magnetickou rezonancí, kde je intenzita EM rušení vysoká.

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky

Volitelné varianty

- možnost s otvorem pro obličej (včetně krytky),
- možnost bez otvoru pro obličej,
- možnost 1-dílného podhlavníku v délce 46 cm nebo 64 cm,
- možnost 3-dílného podhlavníku v délce 46 cm,
- možnost vyrobit šířku ložné plochy 76 cm nebo maximálně 83 cm (rozměr desky),
- možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit),
- možnost nahrazení obou ovladačů lištovým konstrukčním nerezovým ovladačem po obvodu lehátka,
- možnost přidání naklápěcích područek (nelze dodatečně dokoupit),
- sklopné zábrany na obou stranách (nelze dodatečně dokoupit).


Volitelné příslušenství

- možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky pod podhlavník,
- možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky v nožní části (nelze dodatečně dokoupit).

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021




RAL 3020



RAL 6019

Vzorník koženky pro Lehátko GE2

Koženky Pandoria Plus řada 20

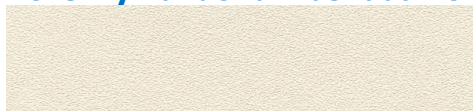

20P47 světle béžová



20P54 limetková




20P55 ledová



20P57 kukuřicová



20P74 modrá

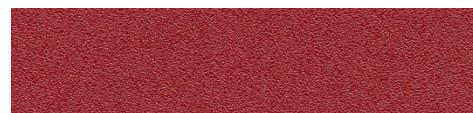


20P79 třešňová


Vzorník koženky Pandoria plus řada 30 - příplatek 1.000,- Kč bez DPH / lehátko



30P46 bílá

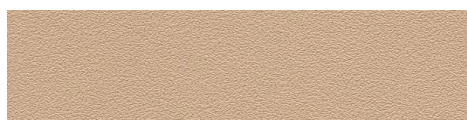

30P48 oblázková

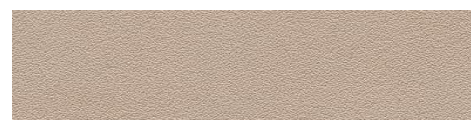

30P49 břízová



30P50 kouřová



30P51 čokoládová



30P75 stříbrně šedá



30P53 platinová



30P76 antracitová



30P52 černá




30P56 královská modrá



30P73 smaragdová



30P77 kaktusová

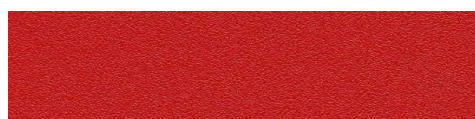

30P58 ohnivá



30P78 fuchsiová



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest

**DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale**



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichtecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
**NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302**

Lehátko GE2 s podhlavníkem 64 cm

Ilustrační obrázek



Lehátko GE2 s podhlavníkem 46 cm

Ilustrační obrázek

